

КАЛІЙ, ФЕРМЕНТАТИВНИЙ

Potassium enzymatic

Каталог. №: 9A0851

Дата випуску інструкції: 2019/03/12
Версія 03



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Діагностичний реагент для кількісного *in vitro* визначення Калію у людській сироватці на фотометричних системах

Кат. №:	Розмір набору	Вміст
914105	5 x 100 мл	4 x 100 мл R1 + 1 x 100 мл R2
914106	5 x 50 мл	4 x 50 мл R1 + 1 x 50 мл R2
914107	5 x 25 мл	4 x 25 мл R1 + 1 x 25 мл R2
910110	5 x 10 мл	4 x 10 мл R1 + 1 x 10 мл R2
948911	1 x 50 мл	1 x 40 мл R1 + 1 x 10 мл R2
9A0851	5 x 20 мл	4 x 20 мл R1 + 1 x 20 мл R2
9T1051	5 x 20 мл	4 x 20 мл R1 + 1 x 20 мл R2
9E1851	2 x 62.5 мл	2 x 50 мл R1 + 2 x 12.5 мл R2

Додатково пропонуються:

910180	2 x 3 мл	Набір стандартів Калію (2 рівні)
910190	2 x 3 мл	Набір контролів Калію (2 рівні)

ПАРАМЕТРИ ТЕСТУ

Метод:	Ферментативний, 2-х точковий кінетичний (фіксований час)
Довжина хвилі:	380 нм (380 – 405 нм)
Температура:	37 °С
Зразок:	Сироватка
Вимірювальний діапазон:	2.0 – 8.0 ммоль/л

СКЛАД РЕАГЕНТІВ КОМПОНЕНТИ

Реагент 1:	КОНЦЕНТРАЦІЯ
LDH	< 50 кО/л
NADH-аналог	< 10 ммоль/л
Субстрат	0.1 кО/л
Азид	0.05%
Реагент 2:	
Піруват кіназа	< 50 кО/л
Азид	0.05 %

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

Реагенти готові до використання.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТІВ

Умови:	Захищайте від світла! Закривайте негайно після використання. Реагенти не заморожувати! Не змішуйте реагенти різних лотів
--------	---

Зберігання:	при 2 -8 °С
Стабільність:	до закінчення терміну придатності

ЗАБІР І ОБРОБКА ЗРАЗКА

Для використання з негемолізованою сироваткою.
Немає необхідності в спеціальній обробці або попередньому приготуванні.
Зразки сироватки повинні бути зібрані таким, щоб тестування було виконано якнайшвидше і протягом 5 днів після взяття проби.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ

Розчин NaCl (9 г/л)
Загальне лабораторне обладнання

ІНТЕРФЕРУЮЧІ РЕЧОВИНИ

Наступні речовини не впливають на результати аналізу в концентраціях, наведених нижче.

Na ⁺	150 мМ
NH ₄ ⁺	0.5 мМ
Ca ²⁺	7.5 мМ
P _i	2.0 мМ
Аскорбінова кислота	10.0 мМ
Zn ²⁺	0.5 мМ
Fe ³⁺	0.5 мМ
Cu ²⁺	0.5 мМ
Тригліцериди	1000 мг/дл
Гемоглобін	500 мг/дл
Кон'югований білірубін	20 мг/дл
Некон'югований білірубін	15 мг/дл

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

Довжина хвилі: 380нм
Друга довжина хвилі: 700 нм
→ Реагент 1: 200 мкл
Зразок: 5 мкл
→ Інкубація: 5 хвилини
→ Реагент 2: 50 мкл
→ 1^е зчитування: 1 хвилина після додавання R2
→ 2^е зчитування: 4 хвилини після додавання R2
(час між 2 зчитуваннями: 3 хвилини)
Лінійне обчислення з 2-точковим калібруванням (стандартне низьке та високе)

РЕФЕРЕНТНИЙ ДІАПАЗОН [1]


3.5 – 5.1 ммоль/л (13.7 – 19.9 мг/дл)

Рекомендується, щоб кожна лабораторія встановила свій власний діапазон норм для населення країни, яке вона обслуговує.

ДІАГНОСТИЧНІ ВИСНОВКИ

Вимірювання калію в сироватці використовують для моніторингу електролітного балансу при діагностиці та лікуванні захворювань, що характеризуються низьким або високим рівнем калію в крові. Невеликі відхилення від нормальних рівнів можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Контроль концентрації калію в сироватці крові важливий як у звичайних, так і в аварійних кабінетах.

ПРИНЦИП ТЕСТУ

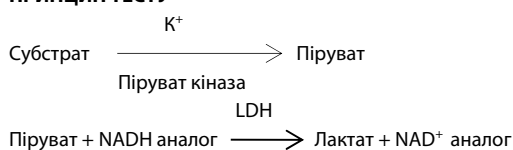

Калій визначається спектрофотометрично за допомогою системи аналізу кінетичного зчеплення з використанням залежної від піруват кінази [2,3]. Сформований піруват перетворюється в лактат, що супроводжує перетворення аналога NADH на аналог NAD. Відповідне зменшення оптичної щільності при 380 нм пропорційно концентрації калію в сироватці.

АБРЕВІАТУРИ

LDH = лактат дегідрогеназа

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІНІЙНІСТЬ/ЧУТЛИВІСТЬ

Цей метод є лінійним між концентраціями калію від 2.0 до 8.0 ммоль/л.
Межа виявлення: 0.87 ммоль/л.

ДОСТОВІРНІСТЬ

Аналіз калію проводився на приладі Olympus AU400 і результати порівнювали з ISE методом. У цілому 52 зразки сироватки в межах 2.7-7.7

ммоль калію і два набори контролів на основі сироватки були випробувані в обох аналізах. Дослідження показало, що метод Dialab (y) мав хорошу кореляцію з існуючим методом ISE (x):
 $y = 1.07x - 0.30$ ммоль/л; $R^2 = 0.98$

ТОЧНІСТЬ (при 37°C)

Точність аналізу калію була протестована на приладі Olympus AU400 на протязі більше 20 днів з двома аналізами в день з використанням контролів Dialab у двох примірниках.

У постановці, n= 80	Середнє значення [ммоль/л]	СВ [ммоль/л]	КВ [%]
Зразок 1	4.62	0.052	1.12
Зразок 2	6.96	0.084	1.20

Від постановки до постановки, n= 80	Середнє значення [ммоль/л]	СВ [ммоль/л]	КВ [%]
Зразок 1	4.62	0.081	1.77
Зразок 2	6.96	0.123	1.77

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Ми рекомендуємо, щоб кожна лабораторія використовувала контролі Калію для підтвердження роботи аналізу.

Ми рекомендуємо: **Набір контролів Калію (2 рівні).**

КАЛІБРУВАННЯ

Рекомендується щотижневе калібрування по 2 точкам з калібратором калію або низьким стандартом і калібратором калію або високим стандартом.

Для аналізаторів, які вимагають нульового калібратора, сольовий розчин може бути використаний для цієї мети, а також низький і високий стандарти калію використовуються в якості калібраторів 2 і 3 відповідно.

Ми рекомендуємо: **Набір стандартів Калію (2 рівні).**

АВТОМАТИЗАЦІЯ

Налаштування параметрів для автоматичних хімічних аналізаторів доступні за запитом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Цей реагент призначений тільки для професійного використання. Не ковтати. Уникати контакту зі шкірою та очима.
2. Реагенти містять азид літію. Компоненти азиду можуть вступати в реакцію зі свинцем або міддю і формувати вибухонебезпечні сполуки. Використовувати велику кількість води при утилізації цього реагенту.
3. Зі зразками сироватки та всіма матеріалами, що знаходяться в контакт з ними, слід звертатися як з такими, що здатні передавати інфекцію. Уникати контакту зі шкірою, захищаючи руки рукавичками і використовуючи відповідний захисний лабораторний одяг.
4. Будь ласка, ознайомтеся з інформаційним листом з безпеки та вживайте необхідних запобіжних заходів для використання лабораторних реагентів.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

Діалаб ГмбН

Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондастрас, Обджект М55, 2351

Вінер-Нойдорф

Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,

Факс: +43 (0) 2236 660910-30,

e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

